

Formål: At sikre, at enhver ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler til patienter er entydig, korrekt og kun udført af personale med relevant uddannelse samt at forebygge utilsigtede hændelser indenfor gældende områder.		
Målgruppe: Akuthjælper i RSYD	Redaktør: Ambulanceinstruktør, Ambulance Syd	Godkendt den: 06-06-2023 Gældende til den: 06-06-2026
Ansvarlig for dokument: Præhospital chef, RSYD	Version: 2	

Måling af blodsukker®








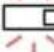
Anvendelse	<p>Hvornår: Måling af blodsukker må foretages i de tilfælde, hvor der er mistanke om, at en patient har lavt blodsukker. Symptomer på lavt blodsukker kan være: Blegthed, hjertebanken, sveder, uro, irritation, kramper og bevidstløshed.</p> <p>Hvordan: Før en blodsukker måling skal akuthjælperem altid sikre sig, at patienten har: A: Frie luftveje. (hjælp patienten med stillingskift og løsne tøj) B: God vejrtrækning. C: Tilstrækkeligt kredsløb. (evt. få patienten ned og ligge, så der kommer blod til hovedet)</p> <p>Procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Der skal altid sprittes af to gange på stik-området med to små sprit swaps.</u> <u>Der skal altid bruges en engangsfingerprik, som kasseres straks efter måling.</u> <p><i>Akuthjælpere der måler blodsukker, skal på forhånd have læst produktvejledningen for det pågældende blodsukkerapparat.</i></p> <p>Er blodsukkeret under 4.0 mmol/l må der gives Hypo-Fit. (Flydende sukker i breve)</p> <p><u>Er du i tvivl? Kontakt AMK-vagtcentralen på 70 15 12 50–</u> Og bed om at tale med den sundhedsfaglige</p>
Vigtigt	<p>Bevidstløse patienter: Hvis patienten er bevidstløs, SKAL der hele tiden være en akuthjælper der sørger for frie luftveje på patienten.</p> <p>Patienten kan eller vil ikke samarbejde: Hvis patienten ikke er i stand til at samarbejde om målingen, må akuthjælperne ikke fastholde patienten.</p> <p>Dokumentation: Skriv på medicin kort og dokumentere patientens blodsukkerværdi. Skriv det i indsatsjournalen og informerer ambulancereddere/helikopter-læge.</p>




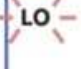

Fejlkoder på apparat

Gælder kun "Contour XT fra Bauer"

Fejlkoder og -symboler

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, bedes du kontakte

VISNING	BETYDNING	AFHJÆLPNING
 (bliver på displayet)	Lav batteristand.	Udskift hurtigst muligt batterierne.
 (blinker i 10 sekunder. Derefter slukkes apparatet.)	Tomme batterier.	Udskift batterierne.
	Apparatet er klar til at foretage en måling.	Fortsæt med målingen af dit blod.
	Utilstrækkelig blodmængde.	Tilføj mere blod indenfor 20 sekunder.
E1 	Temperatur for høj eller lav.	Flyt apparatet til et sted, hvor temperaturen er indenfor apparatets driftsområde: 5 °C – 45 °C. Lad apparatet tilpasse sig denne temperatur i op til 20 minutter, inden du foretager en måling.
E2 	Teststrimlen er ikke fyldt nok til en nøjagtig måling. Blodmængden er utilstrækkelig.	Tag teststrimlen ud, og foretag målingen igen med en ny teststrimmel. Vent med at foretage målingen til den blinkende bloddråbe vises på displayet.
E3 	<ul style="list-style-type: none"> Apparatet registrerer en brugt teststrimmel. Der blev brugt en forkert kontrolopløsning. 	<ul style="list-style-type: none"> Tag teststrimlen ud, og foretag målingen igen med en ny teststrimmel. Vent med at foretage målingen til den blinkende bloddråbe vises på displayet. Ved måling med kontrolopløsning skal du sørge for at bruge CONTOUR NEXT-kontrolopløsning.
E4 	Teststrimlen er ikke isat korrekt.	Tag teststrimlen ud, og sæt den korrekt i (se side 7).

VISNING	BETYDNING	AFHJÆLPNING
E5 E9 E6 E12 E8 E13	Potentiel software- eller hardwareproblem.	Tag teststrimlen ud, og foretag målingen igen med en ny teststrimmel. Hvis problemet fortsætter, kontakt Bayer Diabetes Care Kundeservice på 4523 5037.
E7 	Forkert teststrimmel.	Tag teststrimlen ud, og foretag målingen igen med en ny teststrimmel. Sørg for at bruge en CONTOUR NEXT-teststrimmel fra Bayer.
E10	Ugyldig dato eller klokkeslæt.	Denne fejl forekommer kun i Kommunikationstilstand. Indstil dato og klokkeslæt som beskrevet på side 18 – 19. Hvis problemet fortsætter, kontakt Bayer Diabetes Care Kundeservice på 4523 5037.
E11	Unormalt resultat.	Tag teststrimlen ud, og foretag målingen igen med en ny teststrimmel. Sørg for at vaske og tørre dine hænder omhyggeligt, og følg nøje anvisningerne i denne brugervejledning. Anvend udelukkende Bayers CONTOUR NEXT-teststrimler.
	Resultatet er over 33,3 mmol/l.	<ul style="list-style-type: none"> • Vask og tør dine hænder og indstikssted omhyggeligt. Foretag målingen igen med en ny teststrimmel. • Hvis resultatet stadigvæk blinker "HI", skal du hurtigst muligt kontakte din diabetesbehandler.
 Blodsukkerværdier over 13,9 mmol/l kan være tegn på en potentielt alvorlig medicinsk tilstand.		
	Resultatet er under 0,6 mmol/l.	<ul style="list-style-type: none"> • Foretag målingen igen med en ny teststrimmel. • Hvis resultatet stadigvæk blinker "LO", skal du omgående søge lægehjælp.
 Blodsukkerværdier under 2,8 mmol/l kan være tegn på en potentielt alvorlig medicinsk tilstand.		